




## 如何护理排液装置

正确护理你的排液装置非常重要，你必须经常排空水泡中的液体，这样伤口附近的积水才能及时流出体外。排液装置中白色部分 (a) 是插入你的体内的。透明色的长管 (c) 从你的体内伸出到体外，并且是用缝线缝在你的皮肤上来固定的。请千万不要用力拉这根管子，以免拉伤皮肤上的缝线，造成不必要的伤害。

水泡 (c) 中形成的吸力把体内产生的液体吸出体外，并存到水泡里。正确使用的方是将水泡捏扁到一半，就像一个未充气的球。当体内液体产生时，液体被抽到水泡中，水泡又鼓成球体。手术后的头3-4天，抽出的液体会带血液或成血液状。这是正常的。过5-7天后，抽出液体的速度会减慢，并且颜色也会逐渐变成稻草色。

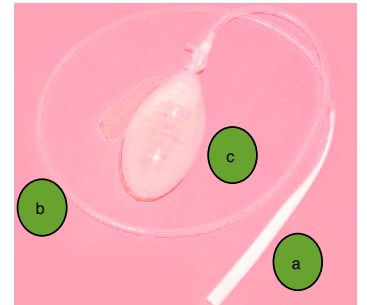

排液装置

你最好在排空和测量水泡中液体前每天挤排液2-4次。自己挤排液非常重要，但是需要一些练习。

用大拇指和食指固定住从体内伸出的透明管子。用另一手的大拇指和食指拿一块棉垫挤压透明管，轻轻地从伤口处滑移到水泡处。这个动作不能一举而成，得分几次来完成。透明管被挤压后，会保持在扁平被挤的状态。

当体液逐渐从体内吸出，流入到水泡中，水泡中的吸力逐渐减退。每当水泡内的体液满到一半或更多时，你必须将水泡排空。排空的做法是打开水泡上面的小开关，然后将水泡内的液体挤出。请避免碰到那个小开关。请测量排出体液的体积并作记录。

### 提示：

从我们的网址 [mastheadpink.com](http://mastheadpink.com) 上打印出排液记录表，以便作正确的记录。去做手术后请带上这份记录表。

千万不要清洗排液装置，尽量避免碰触小开关。

水泡中的液体排清后，先将小开关开着，捏水泡至扁，然后关紧小开关。

排液装置可以挂在你的衣服上，或用一个项链式的绳子挂在你的脖子上，也可以挂在胸罩上，或放在胸下。地心引力会使体液从体内吸出。

多数医生不建议你在排液期间洗澡。请咨询你的医生。

watch our how-to-video at [mastheadpink.com](http://mastheadpink.com) 请上我们的网址观看有关如何使用排液装置的短片